

Integração com Neogrid

Sincronia entre Consumo e Reposição

A integração entre o **V2Saúde** e a **Neogrid** automatiza a visibilidade do seu estoque e do consumo de materiais para o fabricante. O processo ocorre de forma transparente: a Neogrid solicita os dados ao sistema com base em períodos específicos, e o V2Saúde responde automaticamente com informações atualizadas.

Com essa tecnologia, o fornecedor monitora estoques locais e em consignação, analisando a necessidade de reposição baseada na sua demanda real. Isso transforma as movimentações internas em inteligência logística, garantindo que o insumo certo esteja disponível no momento exato.

Como funciona na prática?


- **Automação Inteligente:** O **V2Saúde** processa e responde automaticamente às consultas da **Neogrid**, eliminando processos manuais o que acarreta na eliminação de erros operacionais.
- **Visibilidade:** O fornecedor passa a visualizar o fluxo de consumo e a posição detalhada dos estoques (atual, consignado e pendente de faturamento).
- **Eficiência Logística:** A reposição passa a ser baseada na sua demanda real, otimizando o giro de estoque e prevenindo tanto a falta quanto o excesso de insumos.

O que a integração faz?

- **Consulta de Vendas:** Reporta as notas fiscais emitidas no período solicitado trazendo visibilidade de consumo.
- **Consulta de Estoque:** Informa o saldo dos produtos presentes no estoque atual, consignado e pendências de faturamento.

Configurando a integração no V2 saúde


- A integração deve ser configurada em **Cadastros > Empresa e preferências**;

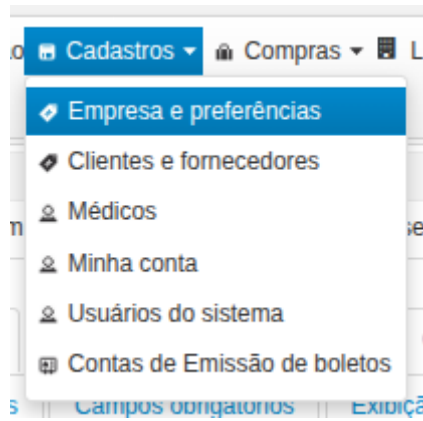

- Acesse a aba "**Integrações**" e selecione **SIM** para 'Integração com Neogrid?';

Neogrid
Integração com Neogrid?
 Sim Não

- Após esta etapa basta acessar o cadastro do **Fabricante** em **Estoque > Fabricante**;

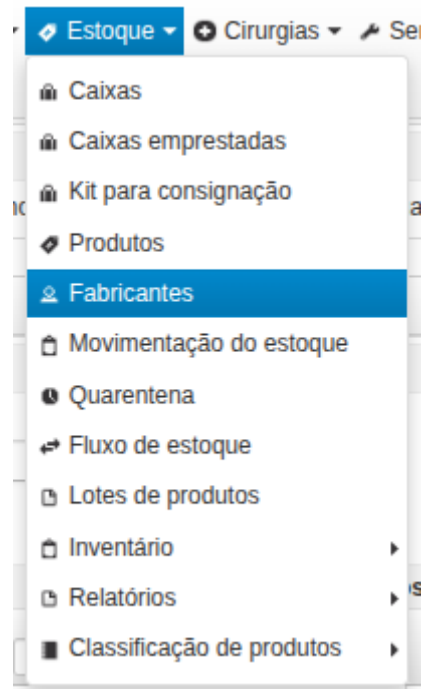

- Clique em 'Editar';

<input checked="" type="checkbox"/>	ABBOTT MEDICAL		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Editar"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ACIST MEDICAL SYSTEMS, INC		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Editar"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AEGISY		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Editar"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALFA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Editar"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALLWIN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Editar"/>

- No cadastro do fabricante clique em 'Gerar novo token' para gerar o token de identificação que será utilizado nas consultas da Neogrid.

Cadastro de fabricante

Nome *
ABBOTT MEDICAL

Token de integração
B52H7vTg9KzKbapND5Ra-WZkUpymU0xe

Telefone
Telefone

CNPJ Inscrição estadual
CNPJ Inscrição estadual

E-mail (Vários separados por vírgula)
E-mail

Responsável Técnico Co
Responsável Técnico C

CEP Endereço
CEP Endereço

Bairro Complemento
Bairro Complemento

Estado Cidade
RJ Cidade

Modelo de etiqueta de rastreabilidade
Escolha...

Ativar Sell Out nas notas emitidas com produtos deste fabricante?

- Sinalize a caixa 'Ativar Sell Out nas notas emitidas com produtos deste fabricante?' e posteriormente em '**Salvar**'.

Cadastro de fabricante

Token de integração
B52H7vTg9KzKbapND5Ra-WZkUpymU0xe

Telefone
Telefone

CNPJ Inscrição estadual
CNPJ Inscrição estadual

E-mail (Vários separados por vírgula)
E-mail

Responsável Técnico
Responsável Técnico

CEP Endereço
CEP Endereço

Bairro Complemento
Bairro Complemento

Estado Cidade
RJ

Modelo de etiqueta de rastreabilidade
Escolha...

Ativar Sell Out nas notas emitidas com produtos deste fabricante?



Documentação Técnica: API de Consumo de Dados Neogrid

1. Relatório de vendas (verificação de consumo)

- Requisição:

1. POST: [URL BASE]/v2-api/sellout/neogrid/notas
2. Authorization: Neogrid[Token de integração do Fabricante]
3. Validação: Período não pode exceder 90 dias

```
{  
  "dataInicial": "2025-04-02",  
  "dataFinal": "2025-04-02"
```

```
}
```

- Retorno de requisição:

```
{
  "relatorioVendas": {
    "tipoRegistro": "01",
    "identificacao": "VENDAS",
    "versao": "052",
    "numeroRelatorio": "01",
    "dataEmissao": "2026-03-05T10:46:35.9",
    "dataInicialPeriodoVenda": "2025-04-02",
    "dataFinalPeriodoVenda": "2025-04-02",
    "cnpjEmissor": "12345678000123",
    "cnpjDestinatario": "12345678000112",
    "notasFiscais": [
      {
        "tipoRegistro": "02",
        "tipoFaturamento": "01",
        "numeroNf": "11111",
        "serieNf": "1",
        "tipoNf": "VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REMET",
        "dataEmissaoNf": "2025-04-02",
        "vendedor": {
          "tipoRegistro": "02",
          "nome": "JOSÉ JÚNIOR",
          "codigo": "889"
        },
        "cliente": {
          "tipoRegistro": "02",
          "codigoCliente": "12.123.123/0001-23",
          "cepCliente": "22555000",
          "ufCliente": "SP",
          "cidadeCliente": "SÃO PAULO - SP",
          "enderecoCliente": "RODOVIA PRESIDENTE DUTRA",
          "bairroCliente": "JARDIM BELA VISTA",
          "nomeCliente": "CLIENTE EXEMPLO 01",
          "telefoneCliente": "12345678"
        },
        "ufEmissorMercadoria": "RJ",

```

```
"cepEmissorMercadoria": "11223344",
"ufDestinatarioMercadoria": "RJ",
"cepDestinatarioMercadoria": "22555000",
"condicaoEntrega": "Sem frete",
"diasPagamento": 0,
"itens": [
  {
    "tipoRegistro": "03",
    "produto": {
      "tipoRegistro": "02",
      "cnpjFornecedor": null,
      "codigoProduto": "ABC-D",
      "tipoItem": "01",
      "quantidadeProdutoEmbalagem": null,
      "precoTabelaUnidade": null,
      "descricaoInternaItem": "MATERIAL EXEMPLO 01",
      "statusProduto": "01"
    },
    "cfop": "5114",
    "quantidadeVendida": 1.0,
    "precoBruto": 350.00,
    "bonificacao": "N",
    "valorTotalBruto": 350.00,
    "valorTotalLiquido": 350.00,
    "valorIpi": 0.00,
    "valorPis": 2.28,
    "valorSubstituicaoTributaria": 0.00,
    "valorIcms": 0.00,
    "valorDescontos": 0.00
  }
],
{
  "tipoRegistro": "02",
  "tipoFaturamento": "01",
  "numeroNf": "22222",
  "serieNf": "1",
  "tipoNf": "DEVOLUCAO SIMBOLICA DE MERCADORIA VENDIDA OU UTILIZADA EM PR",
  "dataEmissaoNf": "2025-04-02",
  "vendedor": null,
```

```
"cliente": {
  "tipoRegistro": "02",
  "codigoCliente": "22.123.123/0001-23",
  "cepCliente": "88559966",
  "ufCliente": "RJ",
  "cidadeCliente": "RESENDE - RJ",
  "enderecoCliente": "RUA CADETE EDSON",
  "bairroCliente": "MONTESE",
  "nomeCliente": "CLIENTE EXEMPLO 02",
  "telefoneCliente": "(24) 1111-2222"
},
"ufEmissorMercadoria": "RJ",
"cepEmissorMercadoria": "11223344",
"ufDestinatarioMercadoria": "RJ",
"cepDestinatarioMercadoria": "22555000",
"condicaoEntrega": "Sem frete",
"diasPagamento": 0,
"itens": [
  {
    "tipoRegistro": "03",
    "produto": {
      "tipoRegistro": "02",
      "cnpjFornecedor": null,
      "codigoProduto": "AB-CD",
      "tipoItem": "01",
      "quantidadeProdutoEmbalagem": null,
      "precoTabelaUnidade": null,
      "descricaoInternaItem": "MATERIAL EXEMPLO 01",
      "statusProduto": "01"
    },
    "cfop": "1919",
    "quantidadeVendida": 1.0,
    "precoBruto": 300.00,
    "bonificacao": "N",
    "valorTotalBruto": 300.00,
    "valorTotalLiquido": 300.00,
    "valorIpi": 0.00,
    "valorPis": 0.00,
    "valorSubstituicaoTributaria": 0.00,
    "valorIcms": 0.00,
  }
]
```

```
        "valorDescontos": 0.00
      }
    ]
  }
]
```

2. Relatório de estoque (verificação de posição)

- Requisição:
 1. POST: [URL BASE]/v2-api/sellout/neogrid/estoque
 2. Authorization: Neogrid[Token de integração do Fabricante]
 3. Validação: Período não pode exceder 2 dias

```
{
  "dataInicial": "2026-03-05",
  "dataFinal": "2026-03-05"
}
```

- Retorno de requisição:

```
{
  "relatorioEstoque": {
    "tipoRegistro": "01",
    "identificacao": "RELEST",
    "versao": "051",
    "numeroRelatorio": "01",
    "dataEmissao": "2026-03-05T11:04:55.202",
    "dataInicial": "2026-03-05",
    "dataFinal": "2026-03-05",
    "cnpjEmissor": "12345678000123",
    "cnpjDestinatario": "12123123000123",
    "estoque": [
      {
        "tipoRegistro": "02",
        "dataEstoque": "2026-03-05",
        "codigoItem": "156009",
        "lote": "MG16",
```

```
    "serial": null,
    "quantidadeEstoque": 0.00,
    "quantidadeEstoqueTransito": 0.00,
    "quantidadeEstoqueComprometido": 0.00,
    "produto": {
      "tipoRegistro": "02",
      "cnpjFornecedor": null,
      "codigoProduto": "ABC-D",
      "tipoItem": "01",
      "quantidadeProdutoEmbalagem": null,
      "precoTabelaUnidade": null,
      "descricaoInternaItem": "MATERIAL EXEMPLO 01",
      "statusProduto": "01"
    }
  },
  {
    "tipoRegistro": "02",
    "dataEstoque": "2026-03-05",
    "codigoItem": "156009",
    "lote": "PL12",
    "serial": null,
    "quantidadeEstoque": 0.00,
    "quantidadeEstoqueTransito": 0.00,
    "quantidadeEstoqueComprometido": 0.00,
    "produto": {
      "tipoRegistro": "02",
      "cnpjFornecedor": null,
      "codigoProduto": "AB-CD",
      "tipoItem": "01",
      "quantidadeProdutoEmbalagem": null,
      "precoTabelaUnidade": null,
      "descricaoInternaItem": "MATERIAL EXEMPLO 02",
      "statusProduto": "01"
    }
  }
]
}
```

Revision #10

Created 3 March 2026 13:27:47 by Suporte

Updated 5 March 2026 14:59:53 by Suporte